




Podręcznik Przedstawiciela Handlowego
jest wyjątkowym narzędziem sprzedaży.
Skutecznie wspiera prezentację korzyści
płynących z produktów LIPOELASTIC®

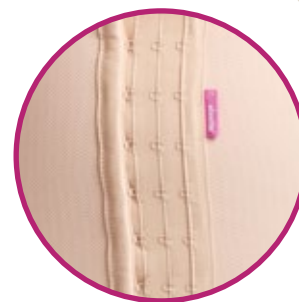

DLACZEGO LIPOELASTIC – 10 GŁÓWNYCH KORZYŚCI

?

10
GŁÓWNYCH
KORZYŚCI

1. OKREŚLONA ROZCIĄGLIWOŚĆ, ELASTYCZNOŚĆ I FLEXCARE

Podstawowe kryteria, które mierzymy to ucisk przekroju poprzecznego i podłużnego w gotowych produktach. Wymagany ucisk wynosi od 20 do 30 mm Hg. Do tego celu używamy sprzętu pomiarowego od producenta z siedzibą w Szwajcarii Swisslastic AG, urządzenie jest oznaczone jako MST MK IV. Korpus tego urządzenia odzwierciedla ciało pacjenta.

Podczas końcowej obróbki dodajemy dodatki Flexcare do materiału CLASSIC, co sprawia, że produkt końcowy jest przyjemniejszy w dotyku, zwiększa trwałość produktów oraz zapewnia stały ucisk.

Dlaczego LIPOELASTIC

- Ucisk klasy II (20 - 30 mmHg)
- Częste testy ucisku z użyciem szwajcarskiej technologii
- Dodatek FLEXCARE zapewnia:
 - a) Materiał miękkszy w dotyku
 - b) Stały ucisk



2. CERTYFIKACJA OEKO-TEX

Ze względu na to, że nasze ubrania są w bezpośrednim kontakcie ze skórą pacjenta po zabiegu chirurgicznym, LIPOELASTIC używa tylko nie szkodliwych materiałów dostarczonych z całej UE.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i jakości naszych produktów końcowych, materiały nie mogą stykać się z żadnymi niebezpiecznymi substancjami. Tkaniny mogą być barwione tylko przez certyfikowanych dostawców Oeko-Tex, aby zapobiec infekcji i innym niepożądanym skutkom.

Żadne z produktów LIPOELASTIC® nie wydzielają nieprzyjemnych zapachów, charakterystycznych dla produktów konkurencyjnych.

Dlaczego LIPOELASTIC

- Autoryzowany producent używający znaku Oeko-Tex
- Bez szkodliwych i niebezpiecznych substancji
- Coroczna certyfikacja Oeko-Tex wszystkich dostawców
- Wszyscy dostawcy z UE
- Tkaniny barwione przez dostawców
- Brak nieprzyjemnych zapachów



Korzyści potwierdzone przez Oeko-Tex.

10
GŁÓWNYCH
KORZYŚCI

?




?

10
GŁÓWNYCH
KORZYŚCI

nanocząsteczki srebra

oddziaływanie

skóra

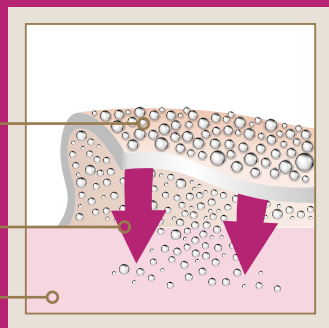

3. ANTYBAKTERYJNY I HIPOALERGICZNY EFEKT – SILVER PROTECT®

Tkanine CLASSIC w ostatecznej obróbce w fabryce przetwarza się cząsteczkami srebra. Zapewnia to właściwości antybakteryjne, które po praniu pozostają niezmienione. Obróbka SILVER PROTECT® reaguje jedynie w materiale, a nie bezpośrednio na ciele, a zdrowa flora na skórze pozostaje nienaruszona. SILVER PROTECT® zmniejsza rozmnażanie bakterii (Klebsiella pneumoniae i Staphylococcus aureus) w ramach tkaniny, ponieważ bakterie karmią się potem.

Dalczego LIPOELASTIC

- Efekt antybakteryjny - SILVER PROTECT®
- Zmniejszenie wzrostu bakterii
- Wpływ tylko w tkaninie, brak reakcji alergicznych na skórze
- Szczególnie korzystne dla pacjentów po operacji
- Niezmiennie efektywny, nawet po praniu

Korzyść potwierdzona przez Instytut Badania Włókiennictwa



Instytut Badania Włókiennictwa

tkanina
CLASSIC

4. ODPAROWYWANIE WILGOCI

Odporność naszych wyrobów na wilgoć jest potwierdzona badaniami zgodnymi z normą EN 31092. Badana była ilość uwięzionej pary przez tkaninę, tzn. przenikalność tkaniny i odporność na wchłanianie wilgoci z powietrza. Tkanina jest przewiewna i bardzo przyjemna w noszeniu. Materiał musi być przepuszczalny dla powietrza, aby zapewnić oddychanie skóry, jednocześnie też musi być odporny na absorpcję wilgoci z powietrza. W ten sposób pomaga skórze pozostać suchą.

Najwyższa odporność wg. EN 31092 wynosi: 2 - 3 m²Pa/W.
Tkanina CLASSIC ma idealną wartość - 2,57 m²Pa/W.

Dalczego LIPOELASTIC

- Przenikalność tkaniny - skóra może oddychać
- Odparowywanie potu - skóra pozostaje sucha
- Odporny na wchłanianie wilgoci z powietrza
- Przyjemny dla pacjentów

Korzyść potwierdzona przez Instytut Badania Włókiennictwa



Instytut Badania Włókiennictwa

CLASSIC
material


10
GŁÓWNYCH
KORZYŚCI

?


wilgoć

LIPOELASTIC®
odzież uciskowa

skóra

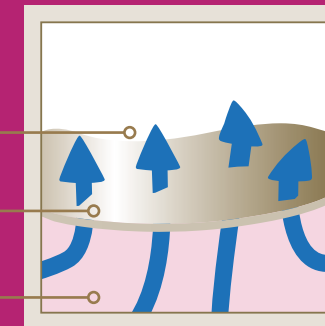

?

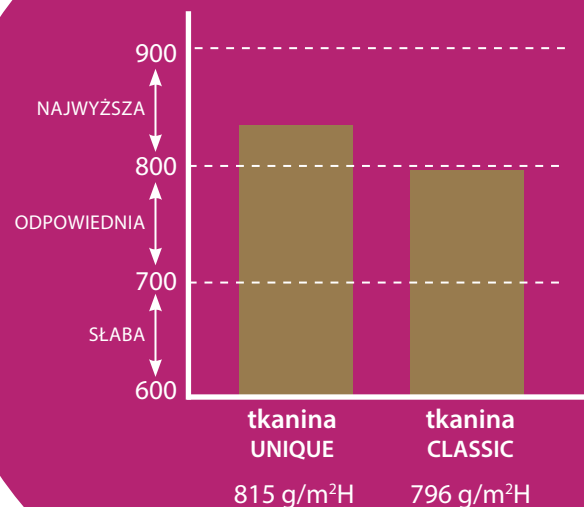10
GŁÓWNYCH
KORZYŚCI

5. ODPROWADZANIE POTU

Badanie przedstawia jakość włókien materiału w odniesieniu do ilości potu, zgodnie z normą EN 16422. Wykazuje stopień do którego tkanina jest w stanie wchłonąć pot ze skóry. Wartość absorpcji potu pomiędzy 800 i 900 g/m²h jest na najwyższym poziomie. Tkanina CLASSIC jest na granicy maksymalnej możliwej absorpcji potu, z wynikiem 796 g/m²h. Tkanina UNIQUE osiąga najwyższą możliwą klasyfikację z wynikiem 815 g/m²h. Cecha ta gwarantuje, że pot jest usuwany z powierzchni skóry w celu utrzymania jej suchej. Jest to istotne, ponieważ jeśli pot pozostaje na skórze, powoduje kontaktowe zapalenie skóry i inne problemy skórne w wyniku połączenia ciepła i wilgoci, co może być bardzo niekomfortowe dla pacjenta.

Dlaczego LIPOELASTIC

- Usuwa pot ze skóry
- Skóra pozostaje sucha
- Brak problemów skórnych wywołanych przez połączenie ciepła i wilgoci
- Tkaniany CLASSIC i UNIQUE zapewniają maksymalny komfort i są najlepiej ocenione w testach
- Brak dodatkowych niedogodności dla pacjentów



Korzyść potwierdzona przez Instytut Badania Włókiennictwa

6. REGULACJA WILGOTNOŚCI

Regulacja wilgotności odnosi się do punktów 4 i 5 i kończy proces usuwania wilgoci. Obejmuje ona tkaninę, która usuwa wilgoć z powierzchni skóry i odprowadza ją do innej warstwy ubrania. Dla naszych celów najważniejszym parametrem w chirurgii plastycznej jest promień Max Wetted, który wyraża działanie tkaniny podczas przenoszenia wilgoci z powierzchni tkaniny na jego odwrotną stronę. Idealna wartość to 1, co oznacza, że kropla potu wnika na jednej stronie materiału i zostaje przekazana przez tkaninę w stosunku 1:1. Tkaniana CLASSIC osiąga wyjątkową wartość 0,85, podczas gdy tkanina UNIQUE osiąga maksymalną możliwą wartość 1.

Dlaczego LIPOELASTIC


- Wilgoć jest usuwana z powierzchni skóry do innej warstwy
- Skóra pozostaje sucha
- Stopień przenoszenia wilgoci ze skóry przez tkaninę wynosi:
 - a) 0,85 dla tkaniny CLASSIC
 - b) 1 dla tkaniny UNIQUE
- Cała wilgoć przenoszona i odparowywana przez tkaninę
- Brak wzrostu bakterii w materiale



Korzyść potwierdzona przez Instytut Badania Włókiennictwa

10
GŁÓWNYCH
KORZYŚCI


?

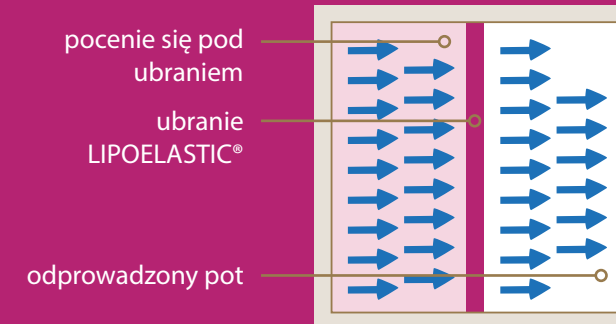

?

10
GŁÓWNYCH
KORZYŚCI

PŁASKIE SZWY

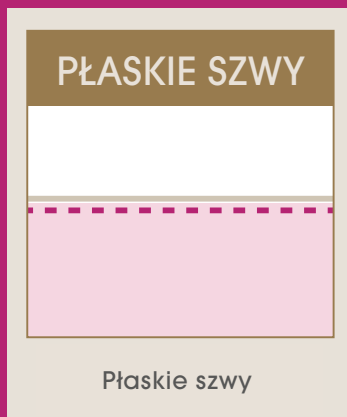

Płaskie szwy

7. PŁASKIE SZWY

Odzież uciskowa LIPOELASTIC® jest wykonana w taki sposób, aby uniemożliwić jakiegokolwiek dyskomfort oraz uciskanie ran na skórze pacjenta po zabiegu. Produkty LIPOELASTIC® mają płaskie szwy, zapewniające komfort podczas noszenia. W celu zapewnienia wysokiej elastyczności i wygody ucisku materiału oraz jego zdolności powrotu do swojego pierwotnego kształtu używane są szwy Zick Zack. Mają one trzy razy większą elastyczność niż w przypadku standardowego szwu i mogą być rozciągane do dwukrotnej długości.

Dlaczego LIPOELASTIC

- Płaskie szwy zapewniają komfort podczas noszenia
- Brak ucisku ran
- Szwy Zick Zack:
 - a) rozciągliwe - do dwukrotnej długości
 - b) powracanie do swojego pierwotnego kształtu

8. NAJSZERSZY WYBÓR

LIPOELASTIC LIPOELASTIC oferuje najszerszą gamę produktów.

Klient może wybierać spośród wielu rodzajów odzieży uciskowej:

- Opatrunki twarzy
- Rękawy uciskowe
- Damskie podkoszulki i body
- Biustonosze uciskowe
- Pasy brzuszne
- Męskie spodnie kompresyjne
- Damskie spodnie kompresyjne
- Odzież używana po zabiegach transferu tłuszczu z otwartym obszarem pośladków.


Oprócz naszego zestawu, oferujemy indywidualnie dopasowane wyroby. Niestandardowe produkty odzieżowe są dostarczane do pacjenta z metką oznaczoną jej / jego imieniem.

Dlaczego LIPOELASTIC

- Najszerszy asortyment
- Odzież dla wszystkich typów operacji plastycznych
- Produkty indywidualnie dopasowane

10
GŁÓWNYCH
KORZYŚCI

?

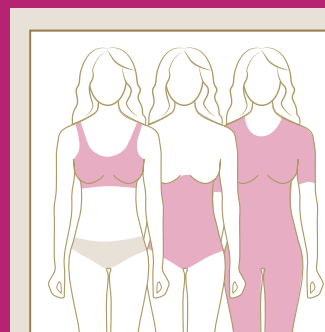

Najszerszy wybór

?




9. TRZY RODZAJE ZAPIĘĆ

KOMFORT

Ten typ mocowania jest bardzo dogodny dla personelu medycznego ubierającego pacjenta natychmiast po zabiegu, a zatem idealny jako pierwszy typ ubrania. Dla ochrony skóry przed naciskiem zamek jest wspierany przez rząd haczyków.

ZMIENNA

Trzy pozycje zapięcia haftki umożliwiają dopasowanie rozmiaru ubrania do stopniowo ustępującego obrzęku ciała. Zapewnia to najlepsze ściśnięcie części ciała po operacji. Odzież posiadająca różne pozycje zapięcia posiada najprecyzyjniejszy ucisk.

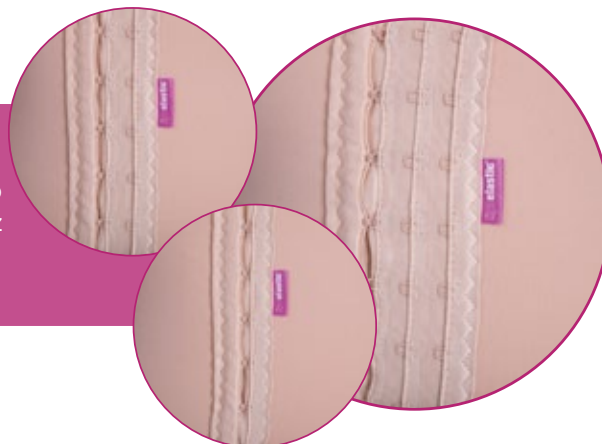

BEZ SUWAKA

Produkty te są zalecane do drugiego etapu opieki pooperacyjnej, gdy obrzęk ustąpi, ale wciąż wymaga ucisku. Całkowicie niewidoczne pod ubraniem.



Dlaczego LIPOELASTIC

- 3 rodzaje zapięcia
- Komfort – wygodna i łatwa do zakładania po zabiegu
- Zmienna – zmienna regulacja rozmiaru
- Bez suwaka – niewidoczna pod ubraniem, modelująca

10. BEZ LATEKSU

Lateks jest jednym z najsilniejszych alergenów. Żaden z produktów LIPOELASTIC nie zawiera składników lateksowych, które mogą potencjalnie powodować reakcje alergiczne. Dla osoby uczulonej na lateks, nawet krótki kontakt ze skórą może powodować reakcję alergiczną skóry.

Dlaczego LIPOELASTIC

- Bez lateksu
- Brak reakcji alergicznych



Korzyści potwierdzone przez Oeko-Tex.

10
GŁÓWNYCH
KORZYŚCI

?

BEZ
LATEKSU

Bez Lateksu



IN MEDICAL SP.ZO.O

UL. POSTĘPU 15C
02-676 WARSZAWA
POLSKA

TEL. +48 725 69 69 69

E-MAIL: ubrania@inmedical.pl

MADE IN EU

WWW.ESHOP.LIPOELASTIC.PL