

FUTURE

DERMAL  
AESTHETICS


amieamed®

HIGHLY  
EFFECTIVE

TECHNOLOGY

BEAUTY


amieamed®

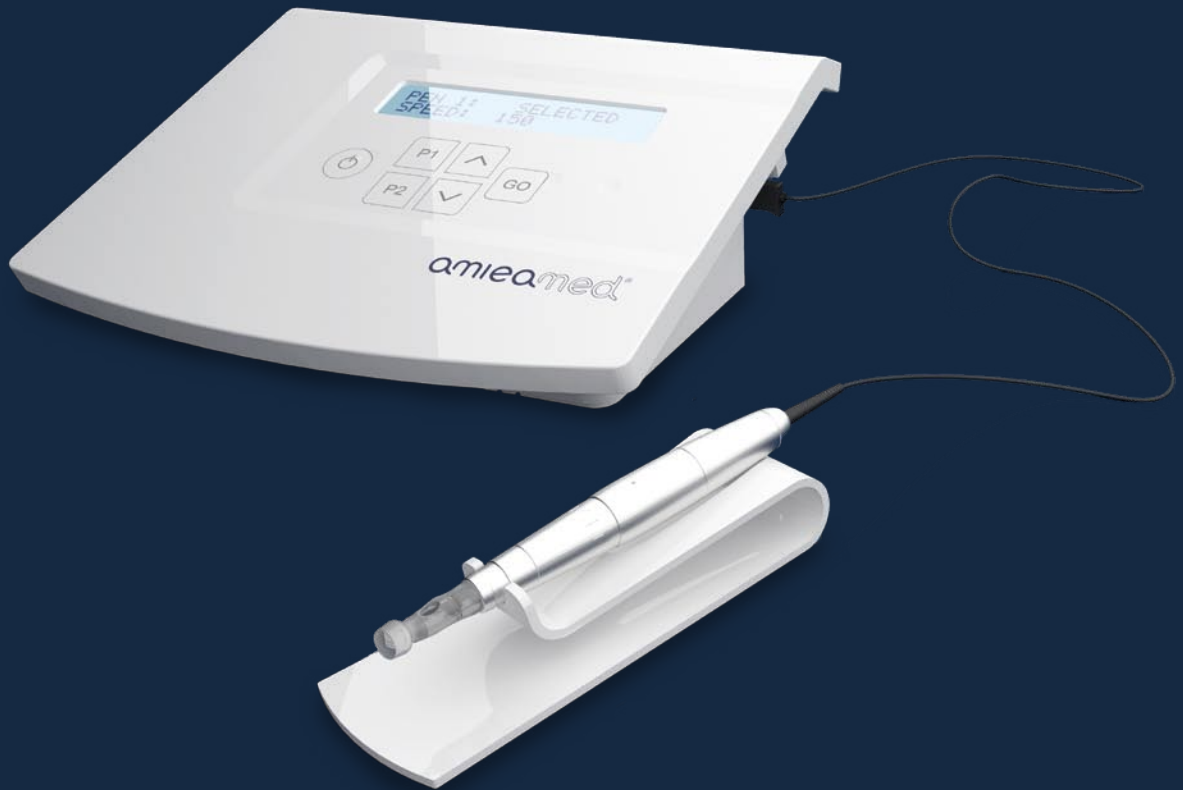

**TECHNOLOGIA JUTRA  
DOSTĘPNA JUŻ DZIŚ**

# ZAUF AJ TECHNOLOGII JUTRA

Zespół AMIEA MED opracował koncepcję zabiegów mikronakłuwania dzięki, którym możliwe jest skuteczne leczenie blizn oraz odmładzanie skóry. Zabiegi wykonywane są z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny. Mikronakłucia stymulują głębokie warstwy skóry, uaktywniając je i pobudzając do produkcji kolagenu, przy niewielkim, w porównaniu do innych metod, podrażnieniu naskórka.

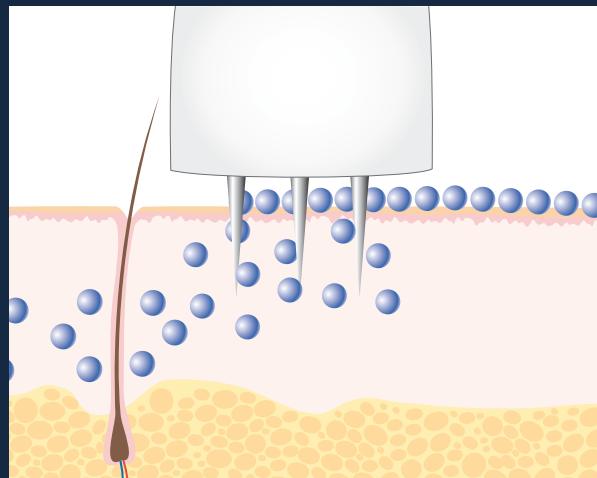

Precyzyjna mikroperforacja cienkimi igłami umożliwia wprowadzenie wysokoskoncentrowanych, aktywnych substancji stymulujących produkcję kolagenu.



Zabiegów odmładzających jest nieskończenie wiele. Jednakże **AMIEA MED** w odróżnieniu od innych dostępnych na rynku produktów, oferuje zabiegi, które wykonywane konsekwentnie i stopniowo gwarantują znakomite rezultaty. Zwłaszcza w dziedzinie leczenia blizn, **AMIEA MED** wprowadziło nową, interesującą terapię, dzięki której blizny wygładzają się, zgrubiały naskórek staje się zdecydowanie bardziej miękki, a widoczne uszkodzenia znacznie zredukowane.

**Dr Peter Scharff**

# REDUKCJA BLIZN

Leczenie blizn i poprawa wyglądu skóry to prawdziwe wyzwanie dla chirurgów i dermatologów na całym świecie. **AMIEA MED** oferuje różnorodne możliwości, które dają znakomite rezultaty. W zależności od kondycji tkanki skóry, miejsca pokryte bliznami stają się wyraźnie gładziej i bardziej miękkie.

NAJWYŻSZE STANDARDY JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA  
**MADE IN GERMANY**

## NAJWAŻNIEJSZE ARGUMENTY

### AMIEA MED

**Pierwsza technologia, która znacznie:**

- spłyca blizny
- zmiękcza zgrubienia
- redukuje napięcie skóry
- skutecznie wygładza blizny trądzikowe

### RODZAJE BLIZN KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO ZABIEGÓW:


- blizny hipertroficzne
- blizny trądzikowe
- rozstępy skórne



przed zabiegiem



bezpośrednio po zabiegu

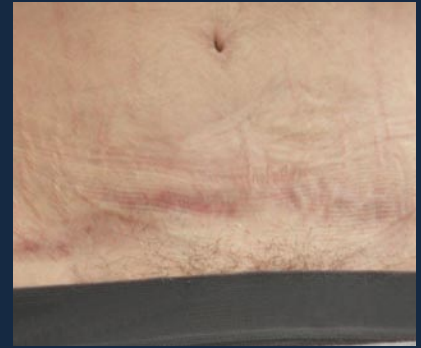

7 tygodni po drugim zabiegu  
w połączeniu z liposukcją  
Źródło: dr Peter Scharff, Berlin.  
Przypadek: leczenie blizn  
z zastosowaniem amiea med.



przed zabiegiem



bezpośrednio po zabiegu



7 tygodni po zabiegu  
Źródło: dr Peter Scharff, Berlin.



przed zabiegiem



po zabiegu  
Źródło: Finishing Touches, Londyn.

# ODMŁADZANIE

## TRWAŁE I SKUTE CZNE

Większość pacjentów poddających się zabiegom odmładzającym oczekuje natychmiastowych rezultatów. Należy jednak pamiętać, że uzyskanie trwałych efektów wymaga czasu. Poprzez mikronakłuwanie skóry właściwej, zabiegi AMIEA MED pobudzają naturalne procesy regeneracyjne skóry, pozostawiając naskórek niemal nietknięty.

Dzięki temu stymuluje się produkcję kolagenu oraz nowych komórek skóry. Po około trzech miesiącach regularnie wykonywanych zabiegów, rezultaty osiągają maksymalny poziom – wygląd skóry wyraźnie poprawia się, zmarszczki starcze i mimiczne są widocznie wygładzone.

Najwyższa jakość i siła innowacji  
**MADE IN GERMANY**

## POTRÓJNY EFEKT

**1** Większa elastyczność skóry poprzez pobudzenie produkcji kolagenu.

## AMIEA MED ODMŁADZA I POPRAWIA WYGLĄD SKÓRY POPRZEZ:


- wywołanie procesów regeneracyjnych skóry dzięki mikronakłuciom (urządzenie medyczne amiea med działa z częstotliwością 50-150 nakłuć na sekundę)
- zastosowanie substancji leczniczych wspomagających procesy regeneracyjne, w skład których wchodzi substancje takie jak: kwas hialuronowy, minerały, witaminy, aminokwasy i peptydy.

Zabiegi AMIEA MED mogą być wykonywane jedynie przez lekarzy medycyny estetycznej i dermatologów.

## NAJWAŻNIEJSZE ARGUMENTY

**2** Nawilżenie skóry dzięki zastosowaniu substancji aktywnych.

**3** Stymulacja naturalnych procesów regeneracyjnych komórek skóry.

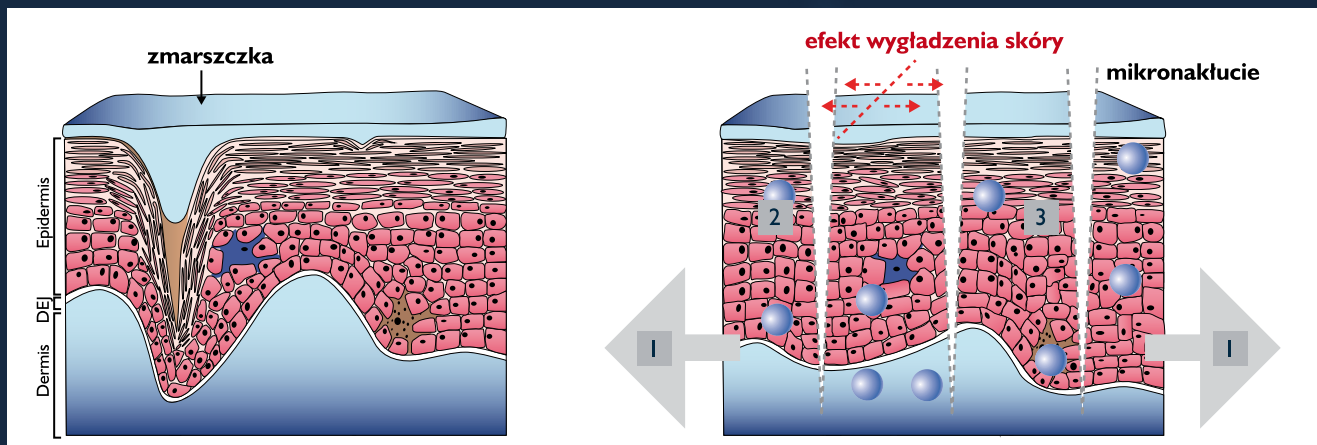

**MT.DERM** to firma która nieustannie poszukuje innowacyjnych rozwiązań.

Zabieg mikronakłuwania skóry z równoczesnym wprowadzeniem substancji leczniczych, to innowacyjne podejście do problemów związanych z odmładzaniem skóry, będące wynikiem gruntownych badań naukowych. Połączenie ze sobą zabiegu mikroperforacji z równoczesną możliwością wprowadzenia w głąb skóry między innymi kwasu hialuronowego i peptyd, daje doskonałe efekty. Poprawa wyglądu miejsc poddanych leczeniu nie pozostawia wątpliwości już po kilku zabiegach.



**Dr Stef Stienstra**  
lekarz medycyny, biochemik, Holandia







przed zabiegiem



po trzech zabiegach

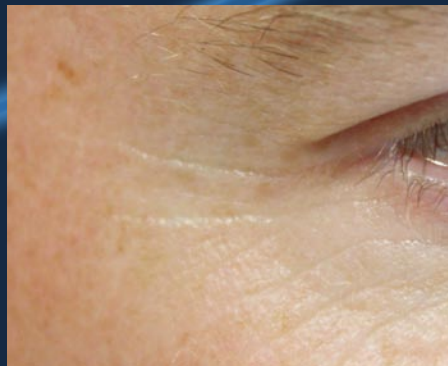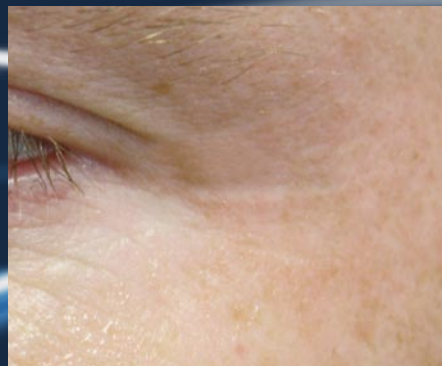

# ZABIEG MIKRONAKŁUWANIA Z ZASTOSOWANIEM AMIEA MED

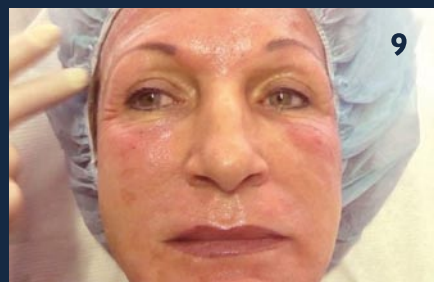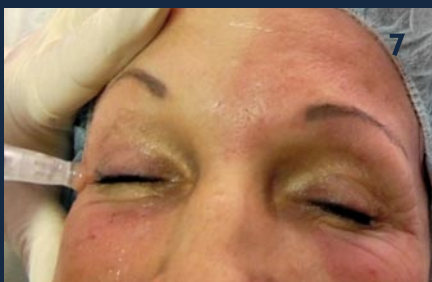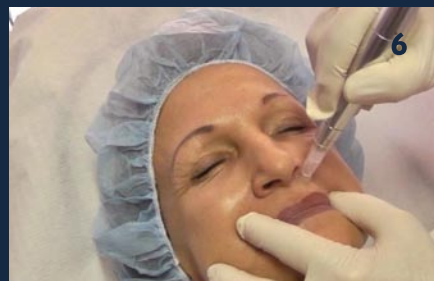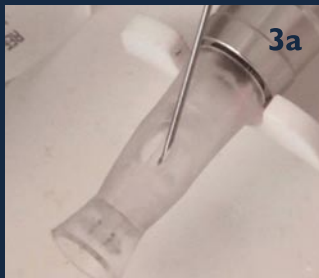



**1**

Dokładnie oczyść i zdezynfekuj skórę. Nie stosuj mechanicznego peelingu.

**2**

Zastosuj znieczulenie miejscowe.

**3a**

Napełnij kartridż aparatu amiea med aktywną substancją.

**3b**

Nałóż cienką warstwę aktywnej substancji bezpośrednio na skórę. Dzięki temu kartridż będzie się gładko przesuwać.

**4-8**

Ustaw prędkość od 100 do 150 nakłuc na sekundę. Przesuwaj kartridż na połowie twarzy od dołu do góry. Powtórz na drugiej połowie twarzy. Nacisk kartridża oraz prędkość nakłuc na czole i skroniach powinny być mniejsze. Na zmarszczkach przesuwaj kartridż ruchami okrężnymi 3-5 razy. Napnij skórę, aby mikronakłucia rozkładały się równomiernie. Nacisk kartridża na zmarszczkach powinien być większy niż wokół nich.

**9**

Nałóż preparat do pielęgnacji skóry po zabiegu. Nie masuj miejsc poddanych zabiegowi.

W zależności od stopnia podrażnienia skóry, powinno się wykonać od czterech do sześciu zabiegów, w odstępach co cztery tygodnie. Terapię należy powtórzyć po trzech miesiącach.



Obejrzyj sposób przeprowadzenia zabiegu online:  
[www.youtube.com](http://www.youtube.com) (amiea med)



## KARTRIDŻE

Kartridże AMIEA MED wyposażone są w wewnętrzną membranę zapobiegającą przedostawaniu się płynu do rękojeści. Metalowe igły osadzone są na ruchomej płytce, która idealnie dopasowuje się do ukształtowania powierzchni skóry. Dzięki temu igły z łatwością docierają do miejsc trudno dostępnych. Nakłucia wykonywane są niezwykle precyzyjnie i szybko.


### AMIEA MED OFERUJE PIĘĆ RODZAJÓW KONFIGURACJI IGIEŁ DOBIERANYCH W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU ZABIEGU:

- 49,- ● 1 LINER do leczenia zgrubiałej i twardej tkanki bliznowatej + mikropigmentacja medyczna
- 57,- ●● 3 LINER do leczenia miękkiej tkanki bliznowatej + mikropigmentacja medyczna
- 85,- ●●● 6 NEEDLE PLATE stosowana w leczeniu blizn trądzikowych, zmarszczek.
- 59,- ●●●● 4 FLAT mikropigmentacja medyczna
- 65,- ●●●●● 5 SLOPE mikropigmentacja medyczna

## KARTRIDŻE


### Sterylny barwniki do mikropigmentacji medycznej MONODOSE 1 ml - 25,-

- szeroka gama kolorów (ponad 50) opracowana przez lekarzy, biochemików i specjalistów makijażu permanentnego
- odpowiednia konsystencja, ułatwiająca wprowadzenie barwnika w skórę
- bezpieczeństwo dermatologiczne - przebadane przez niezależny Instytut Dermatest® w Münster (Niemcy), który przyznał naszym barwnikom najwyższą ocenę „Excellent”
- składniki o jakości farmaceutycznej
- nie zawierają toksycznych pigmentów, metali ciężkich oraz aminów aromatycznych
- zgodne z Dyrektywą Kosmetyczną Unii Europejskiej (EU resolution ResAP 2008/1)
- produkowane w Niemczech w laboratorium z certyfikatem ISO 9001
- sterylizacja radiacyjna



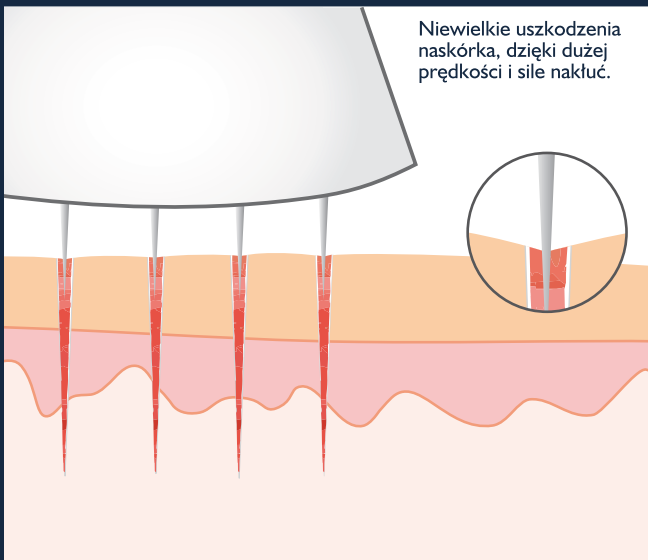


Niewielkie uszkodzenia naskórka, dzięki dużej prędkości i sile nakłuc.

Precyzyjne i wykonywane z dużą siłą nakłucia (igły wkluwają się prostopadle do powierzchni skóry) minimalizują powstawanie uszkodzeń na skórze.

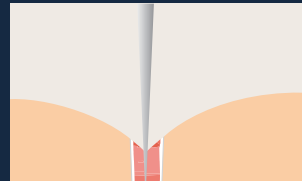

Mniejsza prędkość i siła nakłuc w innych aparatach wywołuje tzw. „efekt parasola”. Igły wgniatają skórę i ją rozrywają, co prowadzi do znacznych i widocznych uszkodzeń.

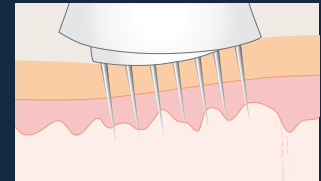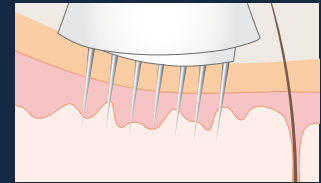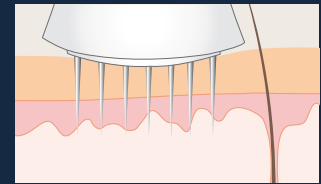


Opatentowana ruchoma płytka z igłami idealnie dopasowuje się do powierzchni skóry - nakłucia wykonywane są prostopadle do powierzchni skóry, dzięki czemu uszkodzenia są minimalne.

## ATUTY

### INNOWACYJNE KARTRIDŻE:

- opracowane i wyprodukowane w Niemczech
- wyposażone w membranę zabezpieczającą przed cofaniem się płynu do rękojeści i ruchomą płytkę z igłami
- sterylne - do jednorazowego użytku
- chronione patentem

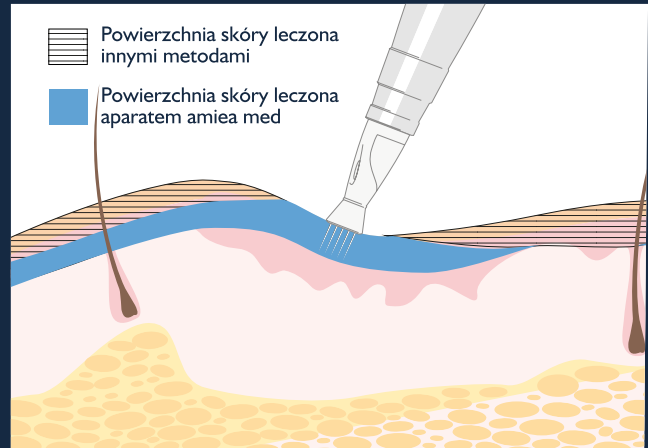

Ruchoma płytka z igielkami umożliwia łatwe dotarcie do wszystkich trudno dostępnych miejsc.



Obejrzyj sposób przeprowadzenia zabiegu online:  
[www.youtube.com](http://www.youtube.com) (amiea med)

# MIKROPIGMENTACJA MEDYCZNA

## ZABIEGI:

- rekonstrukcja brodawki sutkowej
- mikropigmentacja kamuflująca blizny i przebarwienia
- rekonstrukcja brwi po chemioterapii

## ZABIEG REKONSTRUKCJI BRODAWKI SUTKOWEJ PO OPARZENIU



dobór koloru



test koloru na skórze



wykonanie szkicu



mikropigmentacja prawej brodawki



mikropigmentacja lewej brodawki




przed zabiegiem



po zabiegu

EC Certificate  
No. GI 13 08 67752 008

# AMIEA MED REVIVE MN

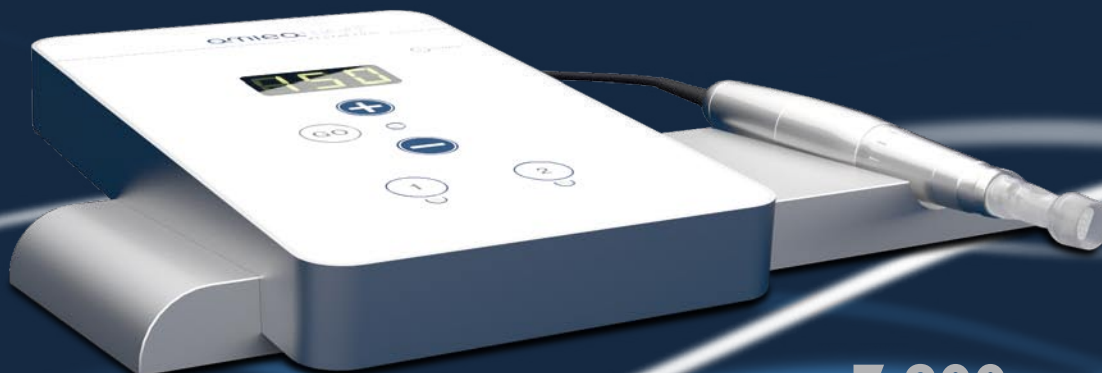

7 900,-

Szczególną wagę przywiązujemy do ergonomii i wysokiej jakości zastosowanych materiałów. AMIEA MED REVIVE MN wykonano z anodowanego aluminium. Urządzenie osadzone jest na podstawie ze stali nierdzewnej. AMIEA MED REVIVE MN charakteryzuje się wysoką jakością wykonania oraz bardzo cichą pracą. Częstotliwość pracy igieł wynosi od 50 do 150 nakłuć na sekundę. Urządzenie dedykowane jest do zabiegów mikronakłuwania oraz mikropigmentacji medycznej.

## PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie:	15 V – (DC)
Częstotliwość:	50 Hz
Moc:	5,7 VA max
Częstotliwość nakłuć:	od 50 do 150 nakłuć na sekundę
wymiary (szerokość x wysokość x długość)	230 x 45 x 185 mm
Waga rękojeści:	około 100 g
Waga całkowita:	około 1100 g


EC Certificate  
No. GI 13 08 67752 008

# AMIEA MED REVIVE



9 900,-

AMIEA MED REVIVE, urządzenie opracowane do przeprowadzania zabiegów medycyny estetycznej. Może wygenerować prędkość, aż do 150 nakłuć na sekundę. Częstotliwość można płynnie regulować. Precyzyjne wklucie igieł w skórę sprawia, że zabieg jest mniej bolesny, drobne podrażnienia są praktycznie niezauważalne i szybko się goją.

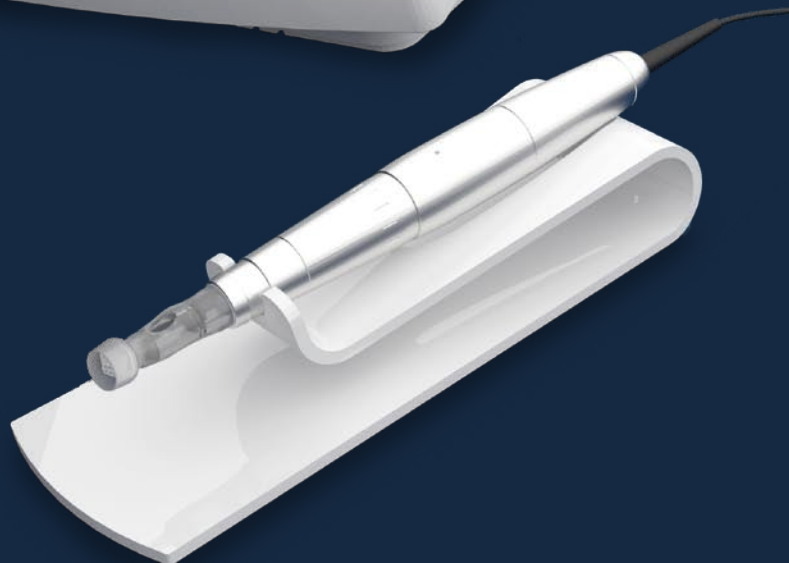

## PARAMETRY TECHNICZNE

Typ:	DA-3.0-EN-MP
Napięcie:	15 V – (DC)
Moc:	7 VA max
Częstotliwość nakłuć:	od 50 do 150 nakłuć na sekundę
Napęd:	silnik Precision DC
Tryb pracy:	ciągły
wymiary (szerokość-wysokość-długość)	261 x 89 x 219 mm
Waga rękojeści:	około 100 g
Waga całkowita:	około 900 g

## ATUTY

**AMIEA MED REVIVE** to urządzenie które daje różnorodne możliwości zastosowań w dziedzinie mikronakłuwania i mikropigmentacji medycznej.

### AMIEA MED REVIVE

- leczenie blizn, bliznowców, blizn trądzikowych, rozstępów
- zastosowanie w zabiegach odmładzających i poprawiających wygląd skóry
- mikropigmentacja medyczna
- urządzenie wyprodukowane w Niemczech
- cicha praca
- patenty: US6,505,530; US 6,345,553; DE 299 19 199; EP I 495 782; EP I 618 915; dodatkowe procedury patentowe w trakcie realizacji.



# AMIEA MED

## MARKA MT.DERM NIEMCY

MT.DERM to firma rodzinna zatrudniająca ponad 150 osób. Fundamentem, na którym opierają się jej działania jest przestrzeganie wysokich standardów etycznych. Jakość jest natomiast podstawową wartością, na której zbudowaliśmy filozofię pracy. Wszyscy pracownicy są ekspertami w swoich dziedzinach. Regularne treningi, szkolenia interdyscyplinarne i codzienna wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi departamentami to podstawa sprawnego działania firmy. Wszystkie produkty i urządzenia produkowane są w Niemczech w naszym zakładzie produkcyjnym, z zastosowaniem najnowszych technologii i najwyższych standardów jakości.

## MADE IN GERMANY

### STWORZONE DLA ŚWIATA



Niemiecka jakość to więcej niż tylko marka. Dla mnie to podstawa i wierzchołek wszystkich działań. Firma założona została w 1998 roku. Zaczynaliśmy w zespole składającym się z 15 osób. Sukces naszych produktów i międzynarodowa pozycja MT.DERM to zasługa wciąż rosnącej, międzynarodowej sieci ekspertów, którzy dzielą naszą misję i inspirują nas, byśmy z każdym dniem stawali się coraz lepsi.

*Jörn Kluge*  
Prezes Zarządu





## DOWÓD JAKOŚCI – NAGRODA ZA WYSIŁEK. CERTYFIKATY TÜV



Norma określająca wymagania dotyczące systemów zarządzania jakością w branży produkcji wyrobów medycznych. Wyznacza standardy zarządzania jakością w obszarze projektowania, rozwoju, produkcji, montażu wyrobów medycznych i obsługi klienta.



Międzynarodowa norma określająca wymagania dotyczące systemów zarządzania jakością. Najbardziej znana i najszerzej stosowana norma Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO).

## CERTYFIKATY


# JAKOŚĆ

## JESTEŚMY DLA SIEBIE NAJBARDZIEJ SUROWYMI RECENZENTAMI

Nieustannie wyznaczając sobie coraz wyższe i coraz ambitniejsze cele, jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniom naszych Klientów. Wykorzystując najnowsze technologie, produkujemy urządzenia najwyższej jakości. Pracownicy działu zarządzania jakością, dokładnie i regularnie sprawdzają wszystkie procedury oraz dokładają wszelkich starań, by wyeliminować najdrobniejsze niedociągnięcia i wskazać obszary optymalizacji procesów produkcyjnych. Stały proces doskonalenia to nic innego jak stawanie się lepszym każdego dnia.

Za obietnicą zapewnienia najwyższej jakości idą konkretne działania. Każdy kartridż opuszczający nasz zakład produkcyjny jest dokładnie sprawdzony. Dokładna kontrola każdego kartridża pod mikroskopem gwarantuje, że nawet najdrobniejsze niedociągnięcia są na bieżąco eliminowane. Jedyny dopuszczalny przez nas margines błędu to 0%.

Podejmowane wysiłki konsekwentnie przybliżają nas do ambitnych celów, jakie przed sobą postawiliśmy. Współpracujemy ściśle z TÜV, największą niemiecką organizacją zajmującą się testami i certyfikacjami. Znak TÜV to więcej niż uznanie jakości i bezpieczeństwa produktów. To symbol zaufania i pewności. TÜV certyfikuje nasze produkty i pomaga nam stale ulepszać procesy technologiczne.

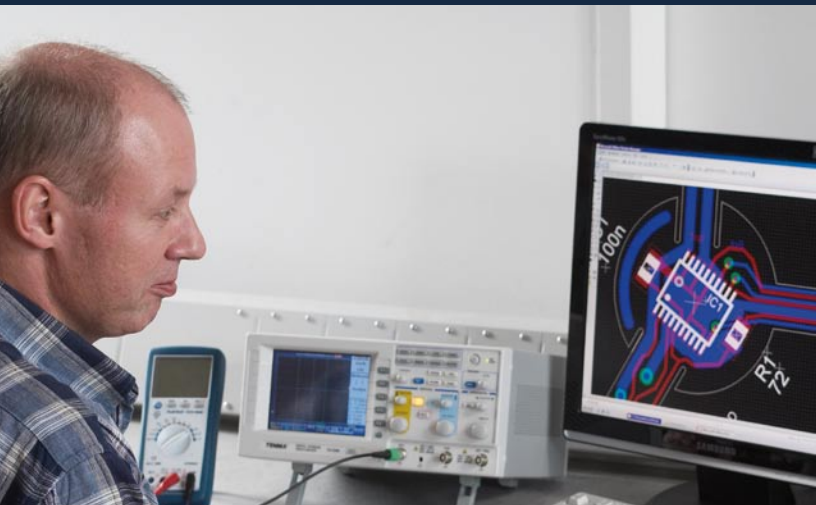

# PRODUKCJA I MONTAŻ

## PERFEKCYJNE DOPASOWANIE

Nasze hale produkcyjne są sercem MT.DERM. Zakład produkcyjny powstał niedaleko siedziby naszej firmy w Berlinie. Zajmuje powierzchnię 5200 mkw. i wyposażony jest w najnowocześniejszy sprzęt do produkcji precyzyjnych i wysoko zaawansowanych technologicznie urządzeń.

Od projektu, poprzez oprogramowanie, aż po montaż. Każdy krok w procesie produkcyjnym

jest dokładnie zaplanowany i stale ulepszany dla osiągnięcia najlepszych rezultatów.

Płynność procesu produkcyjnego zapewnia wysoka organizacja pracy. Nasi specjaliści pracują zarówno w zespołach jak i indywidualnie, a wzajemna odpowiedzialność za siebie jest kluczem do sukcesu. Regularne szkolenia i wysoko wykwalifikowana kadra to podstawa zapewniająca wysoką jakość naszych wyrobów.

## DORADCY NAUKOWI

**Dr STEF STIENSTRA**  
lekarz medycyny, biochemik



**Prof. dr hab. HEINZ LEHR**  
ekspert w dziedzinie  
mikro systemów medycznych



**PETER SCHARFF**  
lekarz medycyny



## INNOWACJE

**ZAWSZE O KROK PRZED  
KONKURENCJĄ**

Oferowanie tak szerokiej gamy innowacyjnych produktów nie byłoby możliwe bez stałego wsparcia i współpracy z ekspertami krajowymi i międzynarodowymi. Lekarze, dermatolodzy, naukowcy i chemicy współpracują z naszymi stałymi doradcami, którymi są Prof. dr hab. Heinz Lehr, dr Stef Stienstra i dr Kevin Meynard. Efektem tej współpracy są nowe pomysły, bieżąca analiza ich wykonalności i cenne wskazówki w obszarze badań i rozwoju. Dzięki współpracy z nimi jesteśmy zawsze o krok przed konkurencją. Innowacyjna siła MT.DERM jest dźwignią naszego sukcesu.

## ROZWÓJ I LABORATORIUM

**DOSKONAŁE POŁĄCZENIE NAUKI  
I TECHNOLOGII JUTRA**

Wielu pracowników działu badań i rozwoju oraz laboratorium to absolwenci renomowanego Uniwersytetu Technicznego w Berlinie (Technische Universität Berlin, TU Berlin). Ich wiedza i wykształcenie pozwalają MT.DERM być zawsze na czasie, a tym samym wypełniać podstawowe założenia misji naszej firmy.

Razem sprawiamy, że niemożliwe staje się możliwe.



In Medical Sp. z o.o.

ul. Postępu 15 C

02-676 Warszawa

tel. +48 601 83 83 66

[www.inmedical.pl](http://www.inmedical.pl)